

使用方法



エンviron独自のデュアルエレクトロニックテクノロジーを採用。低周波ソノフォレーシス（超音波導入）とパルス型イオントフォレーシス（イオン導入）を同時出力でき、肌が最も必要としているところに美容成分を効率的に浸透*させます。*：角質層まで

このスタートアップガイドでは、DFモバイルの主な使用方法のみをご案内しています。ご使用前には、付属の取扱説明書でより詳しい説明や注意事項を必ずご一読いただき、本製品を安全に正しくご使用いただけますようお願いいたします。

▲ 安全に関する注意 ▲

微弱電流を使用するため、トリートメント前にアクセサリ類を全て外してください。

Step 1

ご愛用のエンviron製品で洗顔、トナーングをします。



DFモバイルを使用する前に、エンvironのクレンジング・洗顔料でしっかり汚れを落とし、トナーングローションで肌を整えてください。

DFモバイルには以下の5つのプログラム(P)が搭載されています。推奨プログラムはP1です。イオン導入をご使用いただけない方はP3をお使いください。

P1: プラスのイオントフォレーシス+ソノフォレーシス（基本推奨プログラム）

P2: マイナスのイオントフォレーシス+ソノフォレーシス

P3: ソノフォレーシスのみ（イオン導入ができない方）


P4: プラスのイオントフォレーシスのみ

P5: マイナスのイオントフォレーシスのみ

※P2・P4・P5をご使用いただく製品は、現在のところありません。機器の性能上、搭載していません。

Step 2

スイッチを入れ、水で軽く湿らせた通電布で本体を包みます。

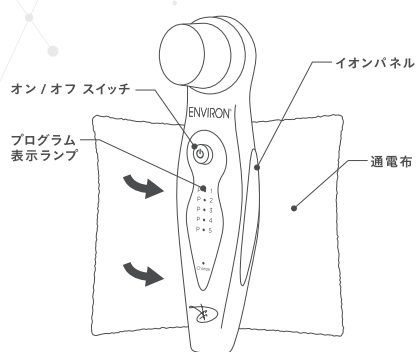

1 オン/オフスイッチを1秒間押して電源を入れると、プログラム表示ランプが青色に光ります。

※初期設定ではP1（プログラム1）に設定されています。

2 通電布を水で軽く湿らせ、両方のイオンパネルを覆うようにして本体を包みます。

※通電布は軽く湿らせるだけにしてください。

Step 3

DFモバイル対象のセラムを肌に塗布します。



DFモバイル対象のセラムを肌の気になる部分に適量を塗布します。トリートメントをしている間にセラムが乾いてしまった場合は再度塗布してください。



DFモバイルで使用できるセラムは裏面をご確認ください。

Step 4

セラムを塗布した部位にDFモバイルを当てます。



効果を最大限に発揮させるために…
定期的な
カウンセリングを
受けましょう

1 トリートメントヘッドを、セラムを塗布した部位に当て、トリートメント開始合図の「ピッ」という音がするまで待ちます。

2 本体を動かさずに、次に「ピッ」という音がするまで（15秒）待ちます。

3 少しずつ動かしながら、気になる部分全てに2の動作を繰り返します。

※15分経過すると自動的に電源が切れます。

トリートメントが完了したら、肌に残ったセラムを肌になじませ、エンviron製品で保湿やサンケアをおこないます。

DFモバイルは毎日お使いいただくことができます。
顔や体の気になる部分に繰り返しおこなう、
集中トリートメントがおすすめです。

トリートメント推奨部位



額や眉間の年齢サイン / 目尻や目の周りの細かい年齢サイン / 唇の上部 / 顎下部分など

顔だけでなく、体の気になる部分にもお使いいただけます。

下記の場合や部位は避けてご使用ください。

過度な日焼けの直後 / 上まぶた / のど

DFモバイルのご使用上の注意

トリートメント中に以下の状態がみられることがあります。不快であれば、使用を一時中止しスキンケアカウンセラーにご相談ください。

●電気の刺激に対する感覚は肌のコンディションにより異なりますが、通常、トリートメント中に顔や手に軽いチクチク感を感じます。

●口腔内に金属製詰め物を使用されている場合、口の中に金属の味がする場合があります。

●一時的に肌の赤みがみられることがあります。

●目の奥にチカチカとフラッシュのような光が見えることがあります。

DFモバイルのお手入れ

●はじめてのご使用前にトリートメントヘッドを消毒用アルコールでふいてください。

●ご使用前後に清潔で柔らかい布を軽く湿らせてふいてください。

●本体を水に浸さないでください。

エンviron エレクトロソニック DFモバイル
メーカー保証のご案内

お買い上げ日より1年間のメーカー保証を
お受けいただくためには下記3点が必要です。

✓ 購入後14日以内に
Web保証登録をお願いします。

下記からアクセスしてください。
登録は数分で完了します。



<https://environwarranty.environ.jp/>

✓ 購入証明となるレシートを保管
してください。



✓ シリアルナンバーをお控えください。

同梱リーフレット裏面または製品パッケージ
底面に表記があります。



▲ 注意 ▲

製品に保証書は同梱されておりません。
Web保証登録がない場合、保証の対象外となることが
ございます。必ずご登録をお願いします。

効果を最大限に
発揮させるために



定期的にカウンセリングを
受けましょう

肌悩み別に5種類のセラムを導入できる
DFモバイル。効果を最大限に発揮させる
ためには、エンviron取扱い店で定期的
にカウンセリングを受け、スキンコンディ
ションにあったセラムをご使用いただく
ことが重要です。プロフェッショナルの
アドバイスを受けて、よりすこやかな肌を
目指しましょう。



DFモバイルと一緒に
使用できるセラム



ブライティング*
＜フォーカスエヴァネッセントプラス＞
ルーセントブライトセラム I & II
30ml×2本
推奨部位：顔全体・気になる部分
*キメを整えることによる



ハリツヤ
＜フォーカスヴァイブランスプラス＞
アヴァンス DFP312 セラム
30ml
推奨部位：顔全体



ハリツヤ
＜フォーカスヴァイブランスプラス＞
A-ブーストセラム 1, 2, 3
30ml
推奨部位：顔全体・気になる部分




年齢サイン
＜フォーカスヴァイブランスプラス＞
フラウンセラム
20ml
推奨部位：目尻・額・眉間




保湿
＜フォーカスモイスタチャープラス＞
ハイドレーティングセラム
30ml
推奨部位：顔全体

各部の名称

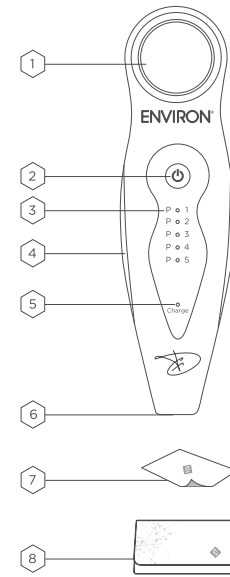

- トリートメントヘッド
- オン/オフスイッチ
- プログラム表示ランプ
- イオンパネル
- 充電表示ランプ
- 充電ソケット
- 通電布
- トラベルポーチ
- 日本対応プラグ
- 海外対応プラグ
- 充電器
- USB充電ケーブル

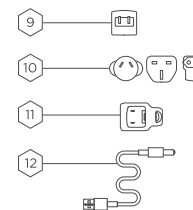

DFモバイルの充電方法

- 充電器に日本対応プラグとUSB充電
ケーブルをつなぎます。
- USB充電ケーブルをDFモバイルの
充電ソケットに差し込み、充電器を
コンセントにつなぎます。

充電器につないだ状態での使用はできません。

※充電中の充電表示ランプはオレンジ色に光ります。最大
充電時間は45～60分(目安)です。バッテリーがフル充電されると、
充電表示ランプが緑色に変わります。

DF Mobile
Startup Guide

エンviron® エレクトロソニック
DFモバイル スキンケアデバイス
スタートアップガイド



ENVIRON®
人生を変えるスキンケア

ENVIRON®
人生を変えるスキンケア

<取扱い店印>

株式会社プロティア・ジャパン

製品や使用方法に関するご相談、
本製品の修理・お手入れなどが必要な場合は、
マイサロン・マイクリニックに
お問い合わせください。

カスタマーサービス：0120-085-048



2020年10月発行 第4版

* P R T O 4 2 0 0 4 7 *